

離心機系列

微量高速離心機DSC-100MH&DSC-102SD

- *高速桌上型離心機小巧不佔空間。
- *DSC-100MH-2外殼材質為耐衝擊ABS塑鋼，是美觀實惠的機種。
- *DSC-100MH-3為金屬外殼，堅固耐用。
- *DSC-102SD為數位型離心機，簡易好操作。內建安全開關裝置，如運轉中蓋子打開，馬達會停止運轉。此機型備有自動剎車系統。
- *自動平衡系統，使運轉平穩又安靜。
- *通過ISO 9001與 ISO13485品質認證。



DSC-100MH-2



DSC-100MH-3



DSC-102SD

型號	DSC-100MH-2	DSC-100MH-3	DSC-102SD	
訂購編號	DSC-100MH-2	DSC-100MH-3	DSC-102SD-HT	DSC-102SD-MAR
轉盤型號	HT-24		HT-24	MAR-24
速度	12,000rpm(固定)		500~12,000rpm	
顯示	沒有		LED數位顯示速度、時間、離心力	
定時器	0~15分鐘數位定時器	0~15分鐘機械定時器	15分鐘數位式定時器(以1秒為單位)	
馬達	串激式馬達		DC無刷馬達	
最大離心力	14,808xg		14,808xg	13,199xg
容量	24支毛細管(Φ1.75x75mm)		24支毛細管(Φ1.75x75mm)	24x(1.5~2.0)ml
標準配件	比例尺(鋁製)		比例尺(鋁製)	沒有
選購配件	圓形比例尺(塑膠製)		圓形比例尺(塑膠製)	沒有
重量(kg)	淨重5.1/毛重5.6	淨重13.0/毛重14.0	淨重13.0/毛重14.0	
尺寸	W300xD300xH240mm	W320xD355xH255mm	W320xD355xH255mm	



HT-24

MAR-24

比例尺(鋁製)
(READER-A)比例尺(塑膠製)
(READER-P)


電源: AC 110V 60Hz (或220V 50/60Hz); DSC-102SD 為 AC 100~240V 50/60Hz

數位桌上型離心機DSC-303SD

堅固耐用金屬外殼。自動平衡系統可延長馬達壽命與降低噪音。安全開關裝置可避免機器完全停止前，上蓋被打開。風扇循環系統，避免馬達過熱。精準的30分鐘數位定時器，可以1秒為單位，作增減設定。快速按鍵一按，機器馬上運轉；快速按鍵一放，機器馬上停止運轉，無需設定時間。自動煞車系統。當機器完全停止時，上蓋會自動打開。多種轉盤可供選擇。通過ISO 9001與ISO13485品質認證。

型號	DSC-303SD				
訂購編號	DSC-1512SD-3	DSC-1524SD-3	DSC-5006SD-3	DSC-303SD-SH	DSC-N1512SD-3
轉盤型號	AR-1512	AR-1524	AR-5006	SB-071550	UAR-1512
速度(rpm)	200~4,000	200~4,000	200~4,000	200~4,000	200~6,000
顯示	LED數位顯示速度、時間、離心力				
定時器	30分鐘數位定時器				
馬達	DC無刷馬達				
最大離心力	2,325xg	2,325xg	2,307xg	2,683xg	5,151xg
容量	12x(5~15)ml	24x(5~15)ml	6x50ml	16x(5~7)ml 12x(10~15)ml 4x50ml	12x(5~15)ml
標準試管套	(5~7)&(10~15)ml 試管套	(5~7)&(10~15)ml 試管套	50ml試管套	(5~7)&(10~15) &50ml試管套	(5~7)&(10~15)ml 試管套
選購配件	(1.5~2.0)ml 試管套	(1.5~2.0)ml 試管套	沒有	(1.5~2.0)ml 試管套	(1.5~2.0)ml 試管套
重量(kg)	淨重19.0/毛重21.0				
尺寸	W390xD505xH290mm				

電源: AC 100~240V 50/60Hz

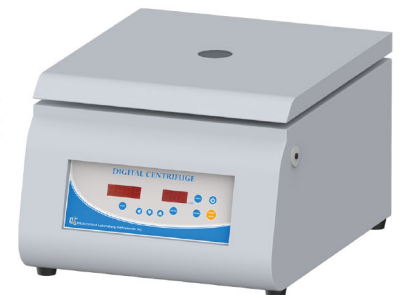

AR-1512



AR-1524



UAR-1512



AR-5006



CTA1503




CTA50



CTA704



CTA15

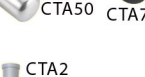

CTA2



CTA7

CTA15: (10~15)ml試管套
CTA7: (5~7)ml試管套
CTA2: (1.5~2.0)ml試管套

新北市汐止區福德一路393巷1號 T:886-2-26942339. 26945547. 26941738 F:886-2-26941695

✉ digilab@ms23.hinet.net www.digisystemlab.com

本公司保留規格修改的權利，規格修改，不另行通知